

INION CPS® UNA SOLUCIÓN BIODEGRADABLE

ES EL ÚNICO SISTEMA CMF BIODEGRADABLE CON APLICACIONES PARA TODAS LAS ÁREAS DEL ESQUELETO FACIAL Y COMPRENDE UNA GAMA DE PLACAS, TORNILLOS Y MALLAS BIODEGRADABLES PARA USO EN NIÑOS Y ADULTOS.



INION CPS®

LOS IMPLANTES INION CPS® CONSERVAN UN MÍNIMO DEL 70 % DE SU RESISTENCIA INICIAL 9 SEMANAS DESPUÉS DE LA IMPLANTACIÓN.
LA BIORREABSORCIÓN TIENE LUGAR DENTRO DE 2 A 4 AÑOS.



SISTEMA PARA BEBÉ CPS DE 1.5 MM
PARA PROCEDIMIENTOS CRANEOFACIALES PEDIÁTRICOS
(USO SIMILAR AL TITANIO 1.0 - 1.2 MM) LA RETENCIÓN
DE FUERZA ES DE UN MÍNIMO DE 6 SEMANAS



SISTEMA CPS DE 1.5 MM
PARA FIJACIÓN CRANEAL Y DEL MEDIO TERCIO FACIAL
(USO SIMILAR AL TITANIO 1.0 - 1.2 MM) LA RETENCIÓN
DE LA FUERZA ES DE UN MÍNIMO DE 9 SEMANAS



SISTEMA CPS DE 2.0 MM
PARA FIJACIÓN ORTOGNÁTICA Y DEL TERCIO MEDIO FACIAL
(USO SIMILAR AL TITANIO 1.5 - 1.7 MM)
LA RETENCIÓN DE LA FUERZA ES DE UN MÍNIMO DE 9 SEMANAS




SISTEMA CPS DE 2.5 MM
PARA FIJACIÓN MANDIBULAR
(USO SIMILAR AL TITANIO 2.0 - 2.4 MM)
LA RETENCIÓN DE FUERZA ES MÍNIMA DE 9 SEMANAS

COMPOSICIÓN

LOS POLÍMEROS UTILIZADOS EN LOS IMPLANTES DE INION CPS®

TMC Carbonato de trimetileno	LPLA L-lactida	DLPLA D, L-lactida
	PGA Poliglicólido	

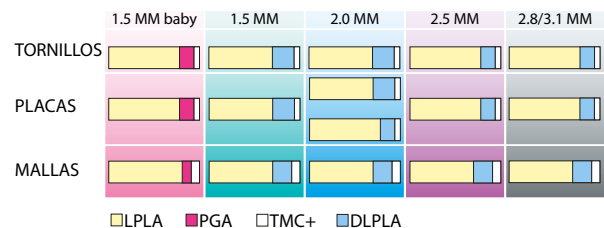

VENTAJAS

DISEÑO DE PLACA FESTONEADA PATENTADO

RELACIÓN RESISTENCIA/MATERIAL OPTIMIZADA
DEFORMACIÓN MINIMIZADA DEL ORIFICIO DEL
TORNILLO DURANTE LA FLEXIÓN.

PERFIL DE PLACA/TORNILLO BAJO PARA UNA
PALPABILIDAD REDUCIDA

INDICACIONES DE USO

LAS PLACAS SON MALEABLES SOLO DURANTE
10 A 15 SEGUNDOS DESPUÉS DE LA ACTIVACIÓN
EN EL BAÑO DE AGUA INION THERMOTM (55 °C)
PARA UNA FÁCIL ADAPTACIÓN AL HUESO.
SE PUEDEN RECALENTAR HASTA TRES VECES
PARA SEGUIR CONTORNEANDO.
EL TIEMPO MÁXIMO DE CALENTAMIENTO ES
DE 30 MINUTOS.
LAS PLACAS SE PUEDEN CORTAR CON TIJERAS.



SISTEMA BABY 1.5 MM

INION CPS® SISTEMA BABY 1.5 MM

PARA PROCEDIMIENTOS PEDIÁTRICOS, USO SIMILAR AL TITANIO 1.0-1.2 MM



PLT-1000
PLACA 4 ORIFICIOS




PLT-1001
PLACA 20 ORIFICIOS
(ORIFICIO CENTRAL REFORZADO)



PLT-1002
PLACA C, 7 ORIFICIOS




PLT-1003
PLACA EN X 7 ORIFICIOS

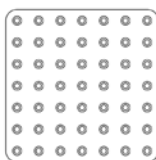

PLT-1028 MALLA 7 X 7 ORIFICIOS


PLT-1029 MALLA 14 X 14 ORIFICIOS

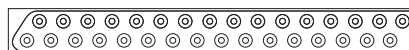

PLT-1059
PLACA 64 ORIFICIOS

TORNILLOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SCR-1220	TORNILLO 1.5 X 4 MM, 5 PIEZAS (+ 1 DE EMERGENCIA 2.0 X 5 MM*)
SCR-1221	TORNILLO 1.5 X 6 MM, 5 PIEZAS (+ 1 DE EMERGENCIA 2.0 X 7 MM*)
SCR-1210	TORNILLO 2.0 X 5 MM, 5 PIEZAS
SCR-1211	TORNILLO 2.0 X 7 MM, 5 PIEZAS

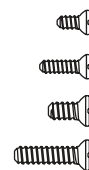

*POR CADA 5 TORNILLOS 1 DE EMERGENCIA SIN COSTO

SISTEMA 1.5 MM

INION CPS® SISTEMA 1.5 MM

PARA FIJACIÓN CRANEAL Y DEL TERCIO MEDIO FACIAL, USO SIMILAR AL TITANIO 1.0-1.2 MM



PTL-1005
PLACA 4 ORIFICIOS




PTL-1006
PLACA 6 ORIFICIOS



PTL-1007
PLACA 20 ORIFICIOS
(ORIFICIO CENTRAL REFORZADO)



PTL-1008
PLACA C, 7 ORIFICIOS

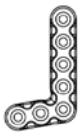


PLT-1009
PLACA EN L
7 ORIFICIOS
DERECHA




PLT-1010
PLACA EN L
7 ORIFICIOS
IZQUIERDA



PLT-1012
PLACA EN X, 7 ORIFICIOS

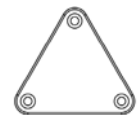

PLT-1011
PLACA BURRHOLE

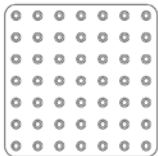

PLT-1030 MALLA 7 X 7 ORIFICIOS

PLT-1031 MALLA 14 X 14 ORIFICIOS




PLT-1081 PLACA ORBITAL 24 X 24 MM

PLT-1083 PLACA ORBITAL 30 X 28 MM

TORNILLOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SCR-1222	TORNILLO 1.5 X 4 MM, 5 PIEZAS (+ 1 DE EMERGENCIA 2.0 X 5 MM*)
SCR-1223	TORNILLO 1.5 X 6 MM, 5 PIEZAS (+ 1 DE EMERGENCIA 2.0 X 7 MM*)

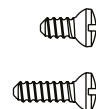

*POR CADA 5 TORNILLOS 1 DE EMERGENCIA SIN COSTO

SISTEMA 2.0 MM

INION CPS® SISTEMA 2.0 MM

PARA FIJACIÓN ORTOGNÁTICA Y DEL TERCIO MEDIO FACIAL, USO SIMILAR AL TITANIO 1.5-1.7 MM



PLT-1013
PLACA 4 ORIFICIOS



PLT-1014
PLACA 4 ORIFICIOS
CON PUENTE



PLT-1017
PLACA C 7 ORIFICIOS




PLT-1038
PLACA 6 ORIFICIOS



PLT-1039
PLACA EN L
7 ORIFICIOS
DERECHA




PLT-1040
PLACA EN L
7 ORIFICIOS
IZQUIERDA

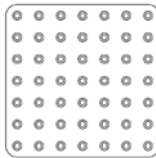

PLT-1032 MALLA 7 X 7 ORIFICIOS

TORNILLOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SCR-1224	TORNILLO 2.0 X 5 MM, 5 PIEZAS (+ 1 DE EMERGENCIA 2.5 X 6 MM*)
SCR-1225	TORNILLO 2.0 X 7 MM, 5 PIEZAS (+ 1 DE EMERGENCIA 2.5 X 8 MM*)
SCR-1284	TORNILLO 2.0 X 9 MM, 2 PIEZAS
SCR-1285	TORNILLO 2.0 X 11 MM, 2 PIEZAS
SCR-1286	TORNILLO 2.0 X 13 MM, 2 PIEZAS
SCR-1287	TORNILLO 2.0 X 15 MM, 2 PIEZAS
SCR-1288	TORNILLO 2.0 X 17 MM, 2 PIEZAS
SCR-1289	TORNILLO 2.0 X 20 MM, 2 PIEZAS

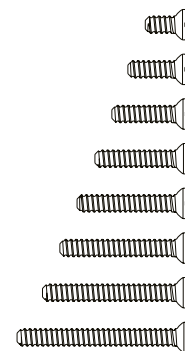

*POR CADA 5 TORNILLOS 1 DE EMERGENCIA SIN COSTO

SISTEMA 2.5 MM

INION CPS® SISTEMA 2.5 MM
PARA FIJACIÓN MANDIBULAR, USO SIMILAR AL TITANIO 2.0-2.4 MM



PLT-1023
PLACA 4 ORIFICIOS



PLT-1024
PLACA 4 ORIFICIOS
CON PUENTE



PLT-1041
PLACA 4 ORIFICIOS
CON PUENTE LARGO



PLT-1025
PLACA 6 ORIFICIOS



PLT-1026
PLACA 6 ORIFICIOS
CON PUENTE



PLT-1036
PLACA 10 ORIFICIOS

TORNILLOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SCR-1206	TORNILLO 2.5 X 6 MM, 5 PIEZAS
SCR-1207	TORNILLO 2.5 X 7 MM, 5 PIEZAS
SCR-1290	TORNILLO 2.5 X 10 MM, 2 PIEZAS
SCR-1291	TORNILLO 2.5 X 12 MM, 2 PIEZAS
SCR-1292	TORNILLO 2.5 X 14 MM, 2 PIEZAS
SCR-1293	TORNILLO 2.5 X 16 MM, 2 PIEZAS
SCR-1294	TORNILLO 2.5 X 18 MM, 2 PIEZAS
SCR-1208	TORNILLO 2.5 X 23 MM, 1 PIEZAS
SCR-1297	TORNILLO 2.8 X 10 MM, 2 PIEZAS
SCR-1298	TORNILLO 2.8 X 12 MM, 2 PIEZAS
SCR-1299	TORNILLO 2.8 X 14 MM, 2 PIEZAS
SCR-1300	TORNILLO 2.8 X 16 MM, 2 PIEZAS
SCR-1301	TORNILLO 2.8 X 18 MM, 2 PIEZAS
SCR-1209	TORNILLO 2.8 X 23 MM, 1 PIEZAS
SCR-1226	TORNILLO 3.1 X 10 MM, 1 PIEZAS
SCR-1227	TORNILLO 3.1 X 12 MM, 1 PIEZAS
SCR-1228	TORNILLO 3.1 X 14 MM, 1 PIEZAS
SCR-1229	TORNILLO 3.1 X 16 MM, 1 PIEZAS
SCR-1230	TORNILLO 3.1 X 18 MM, 1 PIEZAS

