

BODY JET[®] DE HUMAN MED

DISPOSITIVO APROBADO PARA LIPOSUCCIÓN ASISTIDA
CON JET DE AGUA PARA TRANSFERENCIA DE GRASA
PARA UN PROCEDIMIENTO MÁS RÁPIDO Y EFICIENTE



ES UN MÉTODO RÁPIDO, CUIDADOSO Y EFICAZ PARA LA ADMINISTRACIÓN DE GRASA AUTÓLOGA QUE PERMITE LIBERAR EL TEJIDO ADIPOSO DE SU ENTORNO SIN DESTRUIR LAS CÉLULAS ADIPOSAS Y PRESERVANDO EL TEJIDO CIRCULANTE.

NO ES NECESARIO APLICAR EL PROCEDIMIENTO TUMESCENTE, NI REALIZAR NINGÚN TRATAMIENTO AL TEJIDO OBTENIDO, COMO CENTRIFUGACIÓN

EL TEJIDO ADIPOSO SE PUEDE INYECTAR DIRECTAMENTE EN LAS ZONAS CORPORALES DESEADAS.


FÁCIL CONTROL DE LA CÁNULA QUE ES MÁS CONFORTABLE PARA LOS PACIENTES Y EL MÉDICO.

SE REQUIERE MENOS DEL 70% DE FLUIDO DE INFILTRACIÓN


RECUPERACIÓN DEL PACIENTE MÁS FÁCIL Y RÁPIDA YA QUE MINIMIZA EL SANGRADO, HEMATOMAS E HINCHAZÓN.

FASES DEL PROCEDIMIENTO



FASE 1:
INFILTRACIÓN DE SOLUCIÓN DE KLEIN
(70% MENOS VOLUMEN DE INFILTRACIÓN
Y TIEMPO DE EXPOSICIÓN QUE LO MÉTODOS
CONVENCIONALES)

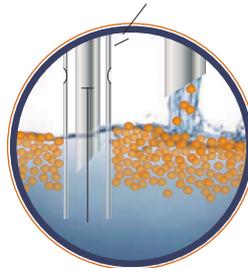

FASE 2:
IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN SIMULTÁNEA
(LAS MICROGOTITAS DE TEJIDO ADIPOSO
SON LIBERADAS POR EL JET DE AGUA, NO
SE FRAGMENTAN O LICÍAN POR LA FUERZA
DE INSERCIÓN DE LA CÁNULA)

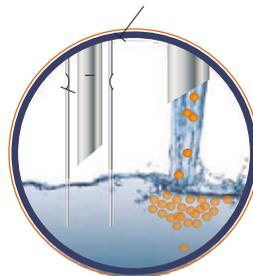

RESULTADO:
ESTRUCTURA HOMOGÉNEA, MENOS
TRAUMA Y RESIDUOS MÍNIMOS

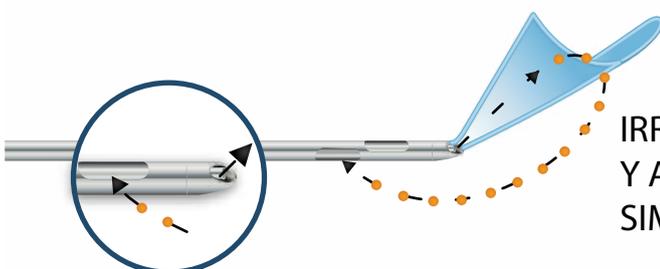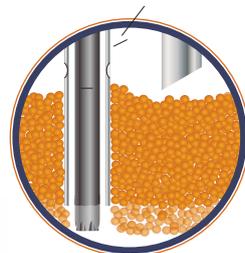

IRRIGACIÓN
Y ASPIRADO
SIMULTÁNEOS



LIPOCOLECTOR
PARA
TRASFERENCIA
DE GRASA